



Care@Home:

Bedienfeld und EPP Kit

ES75HC-K-GR-M03

Erste Schritte



Zweckbestimmung des Produktes / Indikation


Hausnotrufsysteme kommen in Frage bei allein lebenden oder über weite Teile des Tages allein lebenden Pflegebedürftigen, die mit handelsüblichen Telefonen in Notsituationen keinen Hilferuf absetzen können und bei denen aufgrund des Krankheits- bzw. Pflegezustandes jederzeit der Eintritt einer derartigen Notsituation erwartet werden kann. Der Anspruch besteht auch dann, wenn der Pflegebedürftige mit einer Person in häuslicher Gemeinschaft lebt, die jedoch aufgrund ihrer körperlichen / geistigen Einschränkungen im Fall einer Notsituation nicht in der Lage ist, einen Hilferuf selbständig abzusetzen.



Der beste Standort für das Bedienfeld



Guter
Mobilempfang

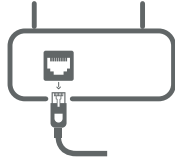

In der Nähe eines
Netzwerkanschlusses




Praktischer
Zugriff für den
Bewohner



Wo Freisprecheinrichtung in
den Räumlichkeiten gehört
werden kann



Einrichten des Bediendfeldes

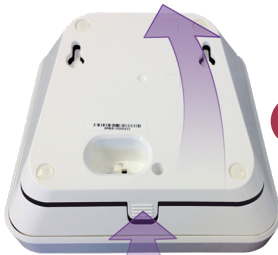

1 Drücken Sie hier

2 Heben Sie die Abdeckung ab



4 Legen Sie die
Notfallbatterie ein



3 Legen Sie die
SIM - Karte ein



5 Ethernet-Kabel
anschießen und an
Netzwerkanschluss
anschießen



7 Schalten Sie
den Strom ein.



6 Schließen Sie das
Netzkabel und den
Stecker an eine
Stromquelle an. Dann
hintere Abdeckung
abschließen.



Technische Daten Bedienfeld

Posten	Daten
Artikelnummer	ES7502HC-GR-K03
Gewicht	0.56 kg, einschließlich Adapter und Batterie
Maße (H x B x T)	152 x 152 x 71 mm
Netzspannungsversorgung	100-240 VAC, 50/60 Hz, 500mA
Montage	Desktop
Berichtsmodi	 Hinweis: Sie können eine Basisstation für bis zu 16 Zielwahlnummern verwenden. Ethernet/Mobil Modell: ● SCAIP ● SIA ● Sprachsignalisierung ● Fehler Ausdruck
Frequenz	869.225 MHz (Europa)
Kommunikationskanäle	Ethernet/Mobil-Modell * SIM-Typ: Standard * zellulärer Typ: 4G/3G/2G
Farbe	Weiß und Grau
Notstrombatterie	● Li-Po, 3.7 V, oder 1400 mAh (Europa) ● 24-Stunden Laufzeit ● Wiederaufladbar mit drei Jahren Batterielaufzeit
Peripheriegeräte	Es können bis zu 64 Peripheriegeräte zugewiesen werden
Betriebstemperatur	0°C bis 49°C
Arbeitsbedingungen	Eingang : 90-240 VAC, 50/60 HZ externes Netzteil UMGEBUNG ● Lagerumgebungstemperaturbereich: -20°C – +50°C ● Betriebstemperaturbereich: 0°C – +49°C ● Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: Bis zu 93% nicht kondensierend



Technische Daten EPP


Posten	Daten
Artikelnummer	ES700EPP-EN-M01
Gewicht	15 g einschließlich Batterie
Maße (H x B x T)	Höhe: 12 mm, Durchmesser: 40 mm
Batterie	● Lithium 3V CR2450 ● Zugelassene Hersteller: GP und Energizer ● Batterielebensdauer: Bis zu fünf Jahre
UMGEBUNG	● Lagerumgebungstemperaturbereich: -20°C – +60° ● Betriebstemperaturbereich: -10°C – +55° ● Wasser- und Staubbeständigkeit: IP67 zertifiziert ● Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: Bis zu 93% nicht kondensierend
Nominale Funkabdeckung	● 400 m (Freiluft) ● 30 m (im Gebäude)



Einrichtung des EPP


1

Drücken Sie die Pairingtaste 5 Sekunden lang.

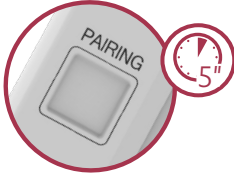

2

Drücken Sie den Knopf.

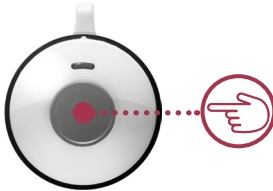

Das Panel gibt einen Signalton aus und die EMERGENCY Taste beginnt blau zu blinken.




EPP in Aktion

Panikknopf



Überwachungsstation

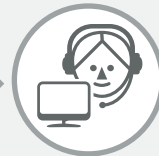

Der EPP blinkt **rot**, wenn der Panikknopf gedrückt wird.



Der EPP leuchtet **grün**, wenn die Batterie ersetzt wird.



Der EPP ist wasserdicht. Sie können den EPP in der Dusche tragen und bei Bedarf einen Notruf aus der Dusche auslösen.



Reinigen der Basisstation und des EPP

Wir empfehlen, ein feuchtes Mikrofasertuch zu einer leichten Reinigung der Außenseite der Basisstation und EPP zu benutzen. Es ist nicht nötig, die Kabel von der Basisstation zu trennen.




Verwendung des Bedienfeld

Die Basisstation steht mit der Notrufzentrale über ein Mobilfunknetz gemäß der Basisstation-Version in Verbindung. Sollte ein Kommunikationsfehler vorliegen, speichert die Basisstation die Mitteilungen und leitet sie, sowie die Kommunikation wiederhergestellt ist, weiter.

Stellen Sie den Netzschalter auf EIN

- Die Basisstation wechselt in den Standby-Modus. In diesem
- Modus ist folgendes sichtbar:
 -  Die POWER LED leuchtet **grün**.
 -  Die Kommunikations-LED leuchtet **rot**.
- In einigen Fällen, z. B. wenn die Basisstation vorkonfiguriert ist, leuchtet der Ring um die NOTRUF-Taste **blau**.
- Sowie die Kommunikation hergestellt ist, leuchtet die Kommunikations-LED **grün**.

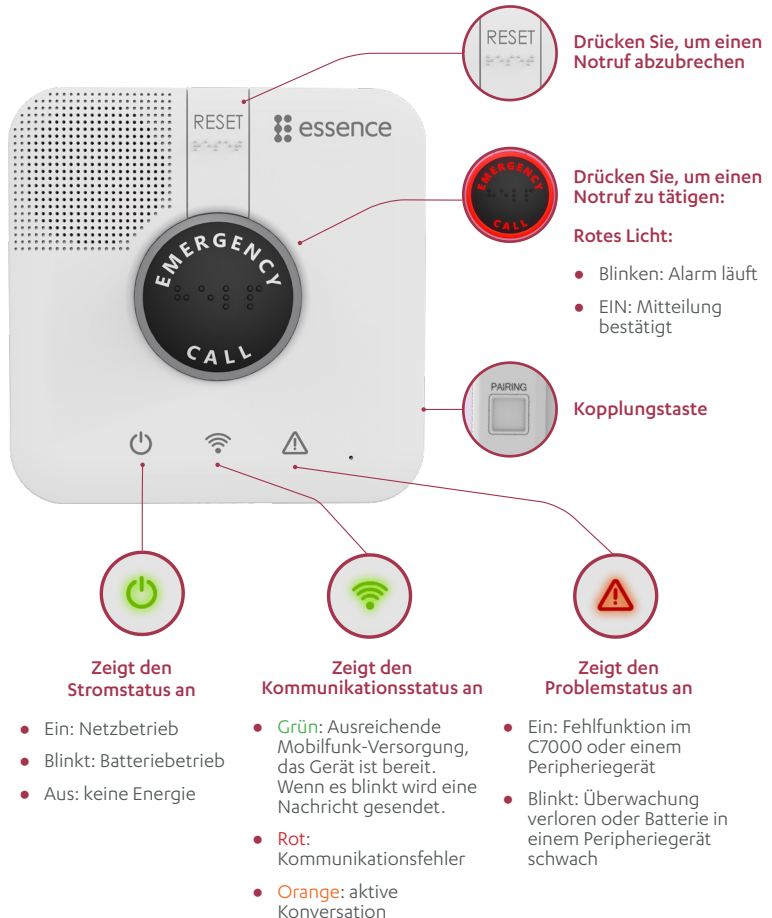



Entwickelt für Notfälle

Mobil/Ethernet-Basisstationsmodelle sind mit Ersatzalternativen ausgestattet, um den Dauerbetrieb in den folgenden Fällen sicherzustellen:

Stromausfall:

- ES7502HC-GR-K03 Mobil/Ethernet-Modell:

Die Stützbatterie kann bis zu 24 Stunden Dauerbetrieb liefern.

- Die Pufferbatterie ist eine wiederaufladbare Batterie. Bei einem DC-Stromausfall meldet das CP dem Bewohner, dass die Pufferbatterie jetzt in Betrieb ist. Wenn die Spannungsversorgung wieder hergestellt ist, wird eine Meldung an den Bewohner gesendet und die Pufferbatterie wird aufgeladen.



VORSICHT: Wenn ein Stromausfall länger als 24 Stunden dauert, wird der Dauerbetrieb beendet, bis die Stromversorgung wieder aufgenommen wird.

- **VORSICHT:** Wenn die Mobil-Kommunikation und Ethernet-Verbindung unterbrochen sind, wird gleichzeitig die Netzwerkkommunikation unterbrochen, bis die Mobil- oder die Ethernet-Verbindung wieder aufgenommen sind.
- **SIM-Karte:** Eine Standard-SIM-Karte gewährleistet einen kontinuierlichen Betrieb, wenn das Mobil-Kommunikationsnetz in Betrieb ist.



VORSICHT: Die Ethernet-Netzwerkkommunikation wird unterbrochen, bis der Router wieder online ist.



Hinweis: auf Selbsttest-Funktion:

Das Gerät führt mindestens einmal pro Woche einen Selbsttest durch. Bei vorliegenden Fehlern oder Problemen, beispielsweise mit der internen Batterie oder anderen Hardware-Komponenten, wird die Notrufzentrale informiert.



Basisstation LEDs

LED	Anzeige	Beschreibung
Strom		• EIN – Strom angeschlossen • Blinken – Batteriebetrieb • AUS – kein Strom oder im Stromsparmmodus
	Grün	
Kommunikation		• EIN – ausreichende Mobilfunkversorgung • Blinken – aktive Übertragung
	Grün	
		• EIN – Kommunikationsausfall • Blinken – Übertragung blockiert
	Rot	
		• EIN – Ein aktives Sprachfenster nach einem Notruf
	Orange	
RESET	RESET Orange	• EIN (für 3 Sekunden) – Taste gedrückt
Trouble		• EIN und Basisstation gibt Signalton – Basisstation oder periphere Fehlfunktion oder Kommunikationsverlust mit der Notrufzentrale • Blinken und Basisstation gibt Signalton – Verlust der peripheren Überwachung oder schwache Batterieleistung • Hinweis: Drücken Sie RESET, um den Signalton auszuschalten
	Rot	
Aktivität		• EIN – Aktivitäts-Timer eingeschaltet • AUS – Aktivitäts-Timer ausgeschaltet • Blinken – Aktivitäts-Timer läuft in 15 Minuten aus
	blauer Ring	
Notruf		• EIN – Notruf erkannt • Blinken – Alarm wird gesendet
	Rot	



Kit Zubehör

Nachfolgend finden Sie die Geräte und Zubehörteile, die im Set ES75HC-K-GR-M03, enthalten sind.

ES75HC-K-GR-M03

Bedienfeld (Basisstation - ES7502HC-GR-K03) Eine Ethernet/Mobil-verbundene Hausnotruf - Basisstation, die für persönliche Notfallanwendungen verwendet wird.	 
Notfall Anhänger Plus (ES700EPP-EN-M01) Ein kompakter, benutzerfreundlicher, drahtloser Notfallknopf in modernem Design. Dieses leichte, tragbare Gerät kann an verschiedenem Zubehör wie einem Halsband oder einem Armband befestigt werden.	
Stützbatterie Eine 3,7 V DC, 1400 mAh Lithium Polymer aufladbare Batterie. Diese sorgt für eine Notstromversorgung für die Basisstation im Falle eines Stromausfalls.	
Kreuzschlitzschraube Eine 2,2 x 6 Kreuzschlitzschraube mit einem verzinkten Stahlkopf zur Befestigung der hinteren Kunststoffabdeckung der Basisstation.	
Netzteil Ein 90-240V AC, 50/60 Hz Wechselstromadapter für die externe Basisstation.	
Ethernet Kabel Ein 1,5 m langes RJ45 Ethernet Kabel.	

Weitere Informationen finden Sie unter:

<http://www.essence-grp.com/resources/smart-care-download.html>

Rechtliche Hinweise: www.essence-grp.com/html/concerning_documents.html

www.essence-grp.com • info@essence-grp.com

© 2023 Alle Rechte vorbehalten der c Ltd.