



Care@HomeTM

MDsense

Erste Schritte

Multidimensionaler Sturzsensor





Wichtige Hinweise

In dieser Anleitung wird beschrieben, wie Sie das MDsense-Gerät montieren und testen

Für eine erfolgreiche Montage beachten Sie Folgendes:

- 1** Montieren Sie das Gerät nur in einer Ecke, die einen Winkel von 90° aufweist
- 2** Montieren Sie das Gerät mit einem Abstand von genau 210 cm zwischen der Unterseite des Geräts und dem Boden
- 3** Montieren Sie das Gerät auf einer sauberen, geeigneten Oberfläche
- 4** Stellen Sie sicher, dass Sie sowohl den langen als auch den kurzen Schutzstreifen von der Rückseite des Geräts entfernen, wie in dieser Anleitung beschrieben
- 5** Drücken Sie das Gerät nach dem Entfernen jedes einzelnen Schutzstreifens 10 Sekunden lang fest gegen die Wand, wenn diese Anleitung Sie dazu auffordert



Der ideale Standort

1

Installieren Sie das Gerät nur in einer Zimmerecke mit einem 90° Winkel.

2

Nur auf einer passenden Oberfläche.


Zu den geeigneten Oberflächen gehören trockene Oberflächen, lackiertes oder versiegeltes Holz und Beton sowie Keramikfliesen.

Auf allen anderen Oberflächen können Sie das Gerät auch mit Schrauben montieren. Weitere Informationen finden Sie im MDsense-Benutzerhandbuch.

HINWEIS: Es wird empfohlen die Oberfläche mit dem beigefügten Alkoholpad von Staub, Feuchtigkeit oder Schmutz zu reinigen.

3


Montage mit einem Abstand von **genau** 2,1 m zwischen Geräteunterseite und dem Boden.

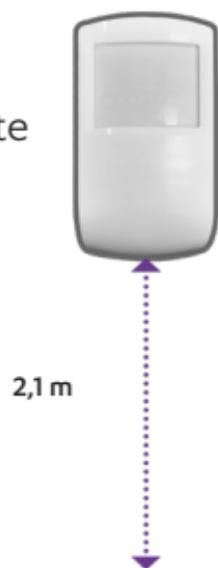


Der effektive Erkennungsabstand für MDsense beträgt bis zu 4 x 4 m.

4


Bitte vermeiden Sie die folgenden Plätze.

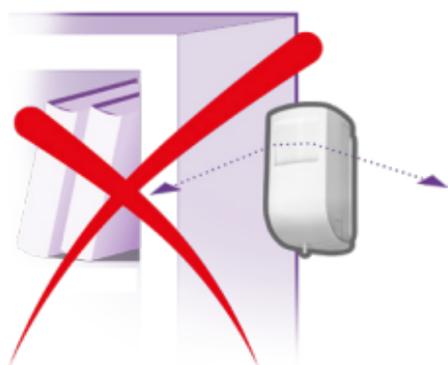


Verdeckt

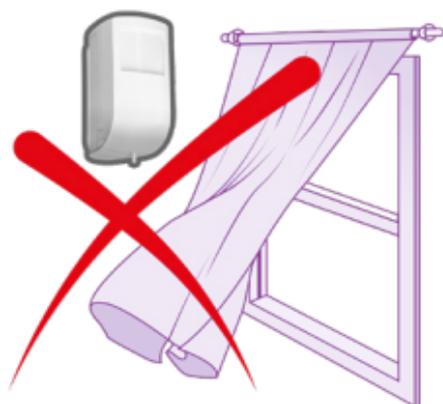


Bewegliche
Gegenstände

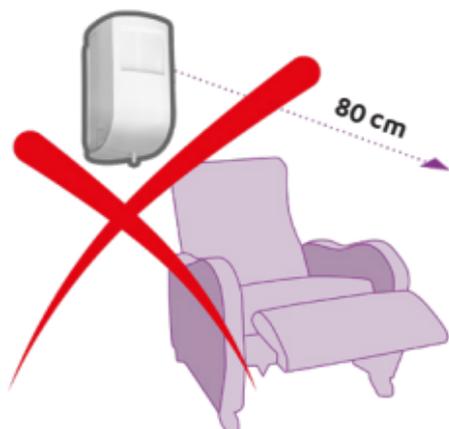

Geringerer Abstand zu Möbeln als 80 cm

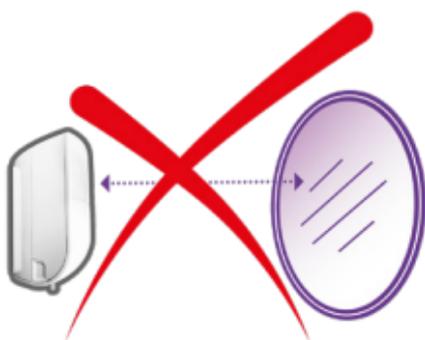

Vor einem Spiegel

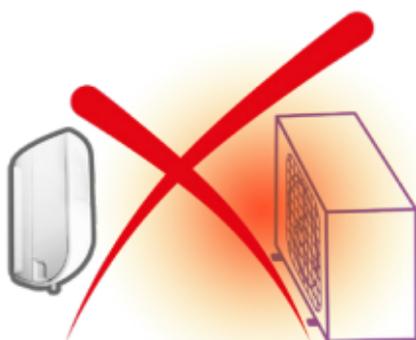


Nähe von Heizkörpern
oder Klimaanlage



Koppeln des Gerätes mit der Basisstation

1

Entfernen Sie das Batteriefach.

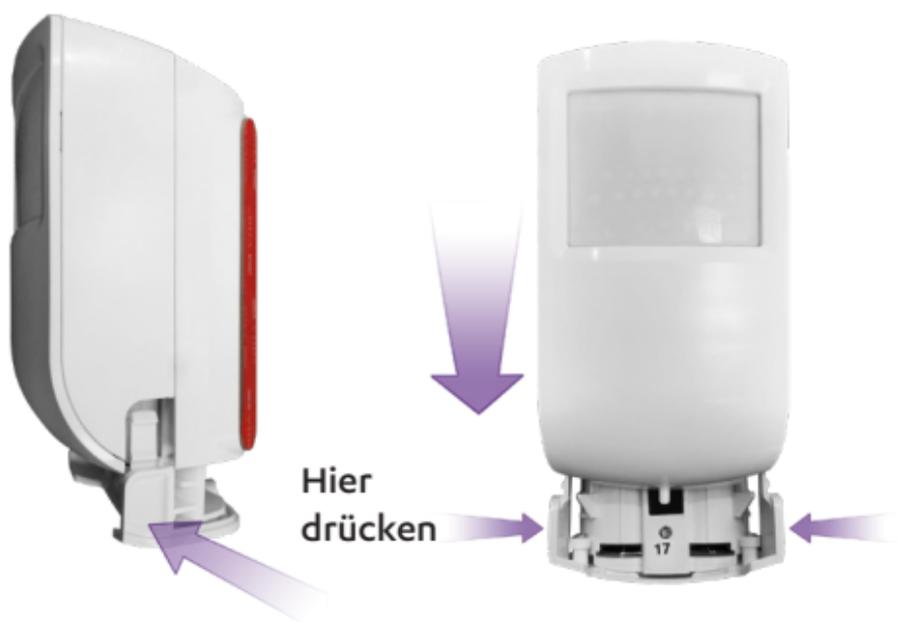

2

Setzen Sie die Batterien ins Batteriefach.

Setzen Sie das Batteriefach noch nicht wieder in das Gerät ein!



3

Drücken Sie die Kopplungstaste an der Basisstation zweimal.



Basisstation

KOPPLUNGSTASTE

4

Setzen Sie das Batteriefach wieder ein.



Die Basisstation antwortet mit einer Sprachantwort.

HINWEIS: Es beginnt ein 20-minütiger Installationsmodus.



Durchführen des Reichweitentests

1

Drücken Sie die Kopplungstaste an der Basisstation zweimal.




Basisstation

KOPPLUNGSTASTE

Die drei Anzeige-LEDs blinken, die Basisstation antwortet mit einer Sprachansage und die Aktivitäts-LED der Basisstation blinkt einmal blau.

2

Ziehen Sie den Pin aus dem Sensor heraus, während Sie an dem geplanten Installationsort für den Sensor stehen.

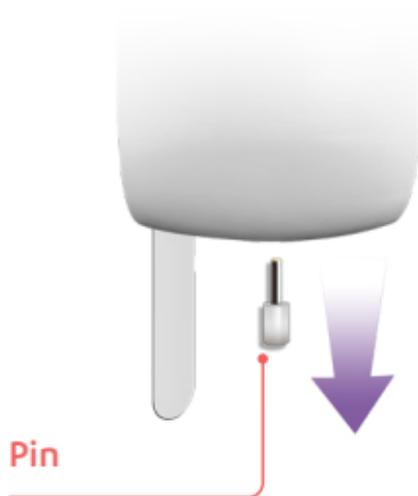

Die Geräte-LED blinkt einmal rot. Die Basisstation antwortet mit einer Sprachansage und die Aktivitäts-LED der Basisstation blinkt einmal blau.

3

Setzen Sie den Pin wieder ein oder stecken Sie die Zugschnur bzw. das mitgelieferte Netzkabel ein.

4

Drücken Sie an der Basisstation die RESET-Taste.



Die Basisstation antwortet mit einer Sprachansage.

Die Aktivitäts-LED der Basisstation blinkt einmal blau, dann hören die drei Anzeige-LEDs auf zu blinken.



Beginn des Montagevorganges

HINWEIS: Um das Gerät in der korrekten Höhe anzubringen empfehlen wir eine Leiter.

- 1 Ziehen Sie den kurzen Schutzstreifen ab.



Den langen Streifen noch nicht abziehen!


- 2 Platzieren Sie das Gerät so an der Wand, dass nur der lange Schutzstreifen Kontakt mit der Wand hat.

- 3 Schieben Sie das Gerät in die Ecke, bis das freiliegende Klebepad vollständig an der Wand anliegt.




4

Drücken Sie die rechte Seite des Geräts 10 Sekunden lang fest gegen die Wand, bis das Gerät sicher an der Wand befestigt ist. Stellen Sie sicher, dass das gesamte Klebepad Kontakt mit der Wand hat.

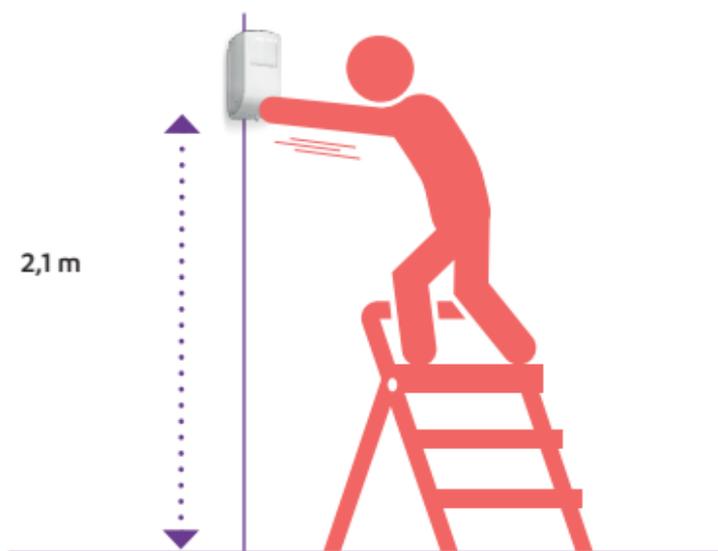

5

Entfernen Sie nun den langen Streifen.

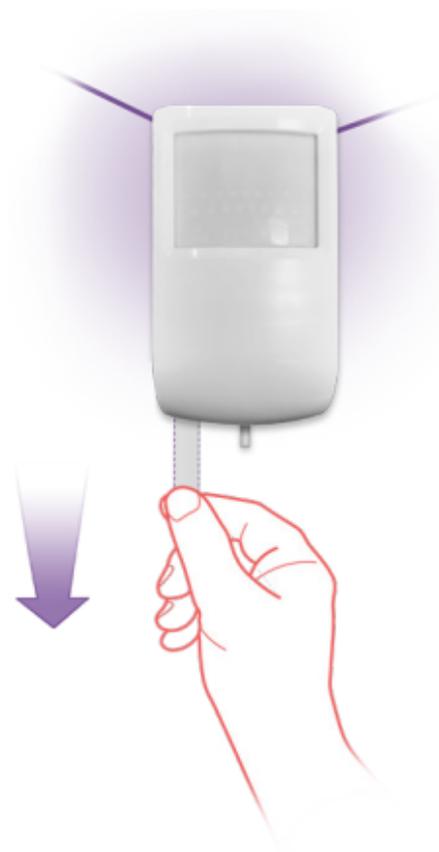

6

Drücken Sie fest die linke Seite des Geräts gegen die Wand für 10 Sekunden, bis das Gerät sicher an der Wand befestigt ist. Stellen Sie sicher, dass es gewährleistet ist, dass die gesamte Klebefläche an der Wand anliegt.



Durchführung eines Sturztests

Während dieses Tests muss der Techniker allein im Raum sein


1

Entfernen Sie die Linsenabdeckung.



2

Gehen Sie vor das Gerät. Die LED blinkt schnell.

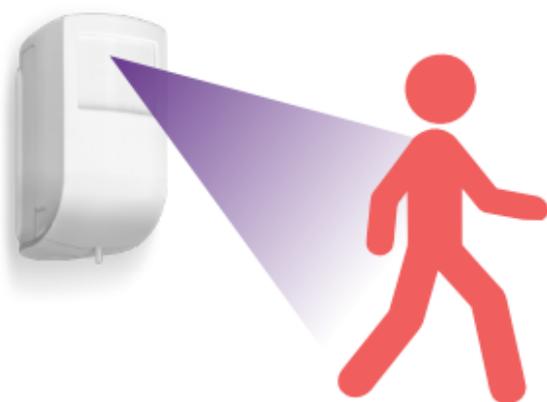

3

Legen Sie sich mit dem Rücken nach unten auf den Boden. Die rote LED erlischt für bis zu 10 Sekunden. Nach 10 Sekunden schaltet sich die rote LED wieder ein und leuchtet etwa 20 Sekunden lang dauerhaft. Nach etwa 20 Sekunden erlischt die rote LED, sofern kein Sturz erkannt wird.




Wird ein Sturz erkannt, blinkt die rote LED langsam. Die Notfall-LED der Basisstation blinkt, ein Notfallalarm wird ausgelöst und die Basisstation antwortet mit einer Sprachansage.

4

Um einen Anruf in der Notrufzentrale zu vermeiden, drücken Sie die RESET-Taste an der Basisstation.

Basisstation

RESET-Taste

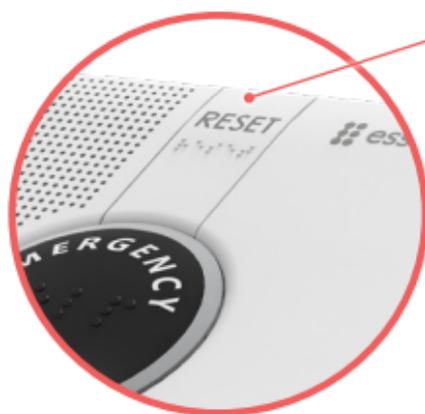

Die Basisstation gibt einen kurzen Piepton und die Notruf-LED hört auf zu blinken.

Der MDsense benötigt nach der Installation eine Lernphase. In dieser Zeit sendet der MDsense keine Alarme, während er die Raumeinstellungen lernt und problematische Bereiche identifiziert. Nach Abschluss der Lernphase nimmt der MDsense den Normalbetrieb auf. Dies kann je nach Raumbedingungen bis zu sieben Tage dauern.



Checkliste

Für eine effektive Installation stellen Sie sicher, dass Sie die folgenden Schritte ausgeführt haben:

- 1** Sie haben einen geeigneten Montageort gewählt
- 2** Sie haben das Gerät mit der Basisstation gekoppelt
- 3** Sie haben einen erfolgreichen Reichweitentest durchgeführt
- 4** Sie haben das Gerät korrekt und im richtigen Abstand zum Boden montiert
- 5** Sie haben sowohl den kurzen als auch den langen Schutzstreifen abgezogen und jede Seite 10 Sekunden lang angedrückt
- 6** Sie haben einen erfolgreichen Sturztest durchgeführt

ESUG05254 Rev 1.0



Rechtliche Hinweise:

www.essencesmartcare.com/privacy-notice

Weitere Informationen:

www.essencesmartcare.com/de/smartcare-partnerbereich

www.essencesmartcare.com • info@essence-grp.com